



Neu!

EINMALHANDSCHUHE

StarGuard® Handschuhe

Der passende Schutz für jede Aufgabe



Ihr persönlicher Handschutz



STARLAB ist bestrebt, Ihnen den bestmöglichen Schutz für Ihre Hände zu bieten. Unabhängig von der Anwendung und Vorliebe des Benutzers bieten unsere fünf neuen StarGuard® Einmalhandschuhe täglichen Schutz im Labor, ohne dabei auf Komfort zu verzichten.

Wählen Sie den für Ihre Anforderungen passenden StarGuard® Handschuh:

COMFORT – für hohen Nitril-Komfort und noch mehr Tastgefühl

PROTECT – für zuverlässigen und robusten Nitril-Schutz

PROTECT+ – mit verlängerten Stulpen für besseren Nitril-Schutz gegen Gefahren

SENSITIVE – komfortabler Nitril-Schutz mit reduziertem Risiko einer Kontaktdermatitis

TOUCH – wenn Sie den sicheren Griff und das besonders gute Tastempfinden von Latex bevorzugen

Komfortabler Handschutz für alltägliche Gefahren

Unsere neuen StarGuard® Handschuhe entsprechen den höchsten europäischen Sicherheitsstandards für Schutzhandschuhe. Drei Handschuhe haben ein **Acceptable Quality Level (AQL) von 0,65**. Zudem wurde die Widerstandskraft aller Handschuhe gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien gemäß **EN374-3:2003** und **EN16523-1:2015** getestet. (Chemische Durchbruchzeiten sind separat erhältlich).

Hergestellt nach höchsten Qualitätsstandards

Alle StarGuard® Handschuhe werden nach den höchsten Standards hergestellt und sind in Deutschland vom TÜV Rheinland gemäß der europäischen Richtlinie 89/686/EEC für persönliche Schutzausrüstung (PSA) getestet und zertifiziert.

Alle StarGuard® Handschuhe sind in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien und Normen:

- Richtlinie 89/686/EWG, PSA Kategorie III
- Richtlinie 93/42/EWG, Medizinprodukt Klasse I
- EN420 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren
- EN374-1:2003 Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen
- EN374-2:2014 Schutz gegen Penetration von Mikroorganismen
- EN374-3:2003 Schutz gegen chemische Permeation
- EN16523-1:2015 Widerstandsbestimmung von Materialien gegen die Permeation von Chemikalien
- EN455 Teil 1, 2 & 3 Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch
- ISO 11193-1 Medizinische Einmalhandschuhe
- ISO 21171/ASTM D6124 Bestimmung von entfernbaren Oberflächenpulver
- ASTM F1671 Schutz gegen Penetration von durch Blut übertragener Krankheitserreger



Getestet gemäß EN16523-1!

Im April 2015 wurde der neuer Standard EN16523-1 zur Bestimmung von Durchbruchzeiten von Chemikalien eingeführt, welcher den bisherigen Standard EN374-3 ersetzt. Die chemischen Durchbruchzeiten unserer StarGuard® Handschuhe wurden nach diesem neuen Standard getestet. Der Standard ist so neu - wir hatten noch nicht einmal Zeit, ihn auf unsere Verpackungen zu drucken!

StarGuard® COMFORT



EN420 EN374-2: 2014 EN374-3: 2003

LEVEL 3 (AQL 0.65)

Ihre Wahl, wenn:

- Ihre Arbeit besondere Beweglichkeit und Fingerspitzengefühl erfordert
- Tragekomfort und bestmögliche Passform entscheidend sind
- Sie die Ermüdung Ihrer Hände durch das Tragen von Handschuhen vermindern wollen
- Eine Kombination von Tragekomfort und Chemikalienschutz benötigt wird

Zertifiziert für besondere Ergonomie!

Messungen des unabhängigen Prüfinstitut US Ergonomics¹ bestätigen, dass der StarGuard® COMFORT durch eine optimierte Passform eine verbesserte Ergonomie aufweist. So können Risikofaktoren minimiert werden, welche zur Ausbildung von Krankheiten durch wiederholte Muskelüberlastung führen können. Daher wurde der StarGuard® COMFORT als **ergonomischer Handschuh zertifiziert**.



StarGuard® COMFORT

Kat.-Nr.	Beschreibung	Größen	Packungsgröße
SG-C-XS	StarGuard® COMFORT	Extra klein	10 x 250
SG-C-S	StarGuard® COMFORT	Klein	10 x 250
SG-C-M	StarGuard® COMFORT	Mittel	10 x 250
SG-C-L	StarGuard® COMFORT	Groß	10 x 250
SG-C-XL	StarGuard® COMFORT	Extra groß	10 x 230

*230 Handschuhe pro XL Box

¹www.us-ergo.com

Außergewöhnlicher Tragekomfort durch verbesserte Passform

Extra-weiches und gleichzeitig starkes Soft-Nitril sorgt für besseres Tastgefühl und minimiert das Überlastungsrisiko der Handmuskeln.

- Zertifizierte Ergonomie reduziert Risikofaktoren für Verletzungen durch Muskelüberlastung
- Legt sich wie eine zweite Haut um Ihre Hand - ideal, wenn die Arbeit besonders viel Fingerspitzengefühl erfordert
- Größere Verpackungseinheiten schonen die Umwelt durch Einsparung von Verpackungsmaterial und Transportwegen



PSA Kat. III Komplexe Ausführung. AQL 0,65. Hellblauer Nitril-Handschuh. Texturierte Finger. Länge: 245 mm. 250 Handschuhe/Box.*



Wie eine zweite Haut

Die verbesserte Passform des StarGuard® COMFORT sorgt für noch besseren Sitz an den Fingern und die Gesamtlänge von 245 mm schützt das ganze Handgelenk.



Nicht nur komfortabel ...

Soft-Nitril für noch besseren Tragekomfort und ein unvergleichliches Tastgefühl



... sondern auch stark

Extra-weich und trotzdem außergewöhnlich stark und dehnbar

StarGuard® PROTECT



Widerstandskraft und Festigkeit für zuverlässigen Schutz

Ein fester und komfortabler Handschuh für verlässlichen Schutz vor Gefährdungen bei der täglichen Laborarbeit.

- Kombiniert Festigkeit und Widerstandskraft gegen Chemikalien
- Gewährleistet Tragekomfort, Tastgefühl und einen sicheren Griff
- Ausgezeichneter Spritzschutz gegen Chemikalien
- Längerer Handschuh (250 mm Gesamtlänge) für besseren Schutz des Handgelenks

Ihre Wahl, wenn:

- Widerstandskraft und Festigkeit Ihres Handschuhs jeden Tag gefordert sind
- Sie einen Handschuh mit exzellenten Spritzschutzeigenschaften suchen
- Eine Kombination aus Schutz und sicherem Griff nötig ist
- Auch bei schwierigsten Arbeiten der Schutz von entscheidender Bedeutung ist

Schutz auf den man sich verlassen kann

Nitril-Handschuhe bieten nicht nur den besten Spritzschutz gegen Chemikalien unter den Einmalhandschuhen, sondern zeigen auch exzellente Barriereigenschaften gegen Biogefährdungen, wasserlösliche Substanzen, schwache Säuren und Basen (pH 4-10), aliphatische Lösungsmittel sowie Öle und Fette.

Exzellente Durchbruchzeiten für Chemikalien:

- Acrylamid (40%) > 480 min.
- Ethidiumbromid (5%) > 480 min.
- Glutaraldehyd (50%) > 480 min.

StarGuard® PROTECT			
Kat.-Nr.	Beschreibung	Größe	Packungsgröße
SG-P-XS	StarGuard® PROTECT	Extra klein	10 x 100
SG-P-S	StarGuard® PROTECT	Klein	10 x 100
SG-P-M	StarGuard® PROTECT	Mittel	10 x 100
SG-P-L	StarGuard® PROTECT	Groß	10 x 100
SG-P-XL	StarGuard® PROTECT	Extra groß	10 x 100



PSA Kat. III Komplexe Ausführung. AQL 0,65. Blau-violetter Nitril-Handschuh. Texturierte Finger. Länge 250 mm. 100 Handschuhe/Box.



Zuverlässiger Schutz für jeden Tag

Das widerstandsfähige und gleichzeitig weiche Material erlaubt außergewöhnlichen Tragekomfort auch bei den schwierigsten Arbeiten - ohne Abstriche beim Spritzschutz!



Länger!


250 mm Gesamtlänge sorgen für optimalen Spritzschutz für Ihre Hände und Handgelenke



Widerstandskraft und Festigkeit

Handschutz auf den Sie sich jeden Tag verlassen können

StarGuard® PROTECT+

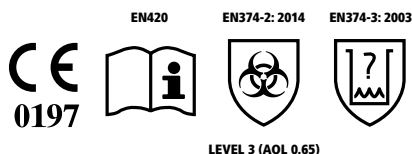

Ihre Wahl, wenn:

- Kontakt mit gefährlichen Chemikalien Ihr täglicher Job ist
- Sie Schutz für Ihr Handgelenk bis zum Unterarm benötigen
- Bei der täglichen Arbeit Gefahren drohen, die eine starke Kombination aus Sicherheit und Zuverlässigkeit voraussetzen
- Sie bei maximalen Schutz einen sicheren Griff benötigen

Optimaler Schutz

Nitril-Handschuhe bieten nicht nur den besten chemischen Spritzschutz unter den Einmalhandschuhen, sondern zeigen auch exzellente Barriereigenschaften gegen Biogefährdungen, wasserlösliche Substanzen, schwache Säuren und Basen (pH 4-10), aliphatische Lösungsmittel sowie Öle und Fette.

Exzellente Durchbruchzeiten für Chemikalien:

- Acrylamid (40%) > 480 min.
- Ethidiumbromid (5%) > 480 min.
- Glutaraldehyd (50%) > 480 min.

StarGuard® PROTECT+			
Kat.-Nr.	Beschreibung	Größe	Packungsgröße
SG-X-S	StarGuard® PROTECT+	Klein	10 x 50
SG-X-M	StarGuard® PROTECT+	Mittel	10 x 50
SG-X-L	StarGuard® PROTECT+	Groß	10 x 50
SG-X-XL	StarGuard® PROTECT+	Extra groß	10 x 50

Verlängerte Stulpen für optimalen Schutz

Ein widerstandsfähiger und dennoch komfortabler Handschuh mit verlängerten Stulpen für den besten Schutz vor Gefährdungen bei der täglichen Laborarbeit.

- Verlängerte Stulpen für verbesserten Schutz des Handgelenks
- Kombiniert Festigkeit und Widerstandskraft für den täglichen Schutz
- Ausgezeichneter Spritzschutz gegen Chemikalien
- Bietet sowohl Schutz als auch sicheren Griff dank texturierter Finger



PSA Kat. III Komplexe Ausführung. AQL 0,65. Blau-violetter Nitril-Handschuh. Texturierte Finger. Länge 295 mm. 50 Handschuhe/Box.



Exzellenter Spritzschutz gegen Chemikalien

Der Widerstand des StarGuard® PROTECT+ gegen Permeation von Chemikalien wurde gemäß EN374-3 und dem neuen Standard EN16523-1 getestet.



Verlängerte Manschetten


Die Gesamtlänge von 295 mm gewährleistet Schutz bis über die Ärmel Ihres Laborkittels



Optimaler Schutz

Dickere Wandstärke und verlängerte Stulpen für optimalen Spritzschutz gegen Chemikalien

StarGuard® SENSITIVE

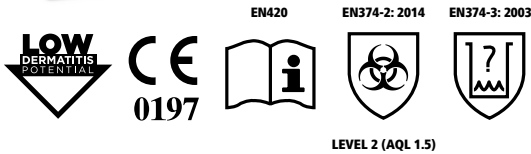

Ihre Wahl, wenn:

- Bedenken bestehen, dass Kontaminationen aus Handschuhen empfindliche Experimente stören können
- Sie unter feuchten Umgebungsbedingungen arbeiten
- Ihre Fingerfertigkeit im Umgang mit Präzisionswerkzeugen nicht durch den Handschuh beeinträchtigt werden darf
- Ein Handschuh für empfindliche Hände benötigt wird

Geringeres Risiko für eine Kontaktdermatitis

StarGuard® SENSITIVE zeigten in klinischen Tests nach Vorgaben der US Food & Drug Administration (FDA) ein geringeres Risiko für Hautrötungen und Reizungen, welche gemeinhin mit einer Kontaktdermatitis assoziiert sind. Daher sind diese Handschuhe von der FDA autorisiert mit dem Attribut "Low Dermatitis Potential" bezeichnet zu werden. Die Festigkeit und der Tragekomfort des StarGuard® SENSITIVE macht ihn zum idealen Alltagshandschuh, auch für Benutzer, die weniger empfindlich für die Entwicklung einer Kontaktdermatitis sind.

StarGuard® SENSITIVE			
Kat.-Nr.	Beschreibung	Größe	Packungsgröße
SG-N-XS	StarGuard® SENSITIVE	Extra klein	10 x 200
SG-N-S	StarGuard® SENSITIVE	Klein	10 x 200
SG-N-M	StarGuard® SENSITIVE	Mittel	10 x 200
SG-N-L	StarGuard® SENSITIVE	Groß	10 x 200
SG-N-XL	StarGuard® SENSITIVE	Extra groß	10 x 200

Ohne Vulkanisationsbeschleuniger - für sensible Haut

Das feste Material des StarGuard® SENSITIVE garantiert nicht nur Fingerfertigkeit und Tragekomfort, sondern ist auch besonders hautschonend.

- Geringeres Potential für eine Kontaktdermatitis - ideal für Nutzer mit empfindlicher Haut
- Enthält keine Vulkanisationsbeschleuniger, welche Experimente kontaminieren könnten
- Texturierte Finger für verbessertes Tastgefühl
- Ausgezeichnete Griffbarkeit auch bei feuchten Umgebungsbedingungen



PSA Kat. III Komplexe Ausführung. AQL 1,5. Blauer Nitril-Handschuh. Texturierte Finger. Länge 240 mm. 200 Handschuhe/Box.



Ausgezeichnete Griffbarkeit auch bei feuchten Oberflächen

Der reduzierte Einsatz von Tensiden während der Produktion führt zu einer spürbar verbesserten Griffbarkeit, insbesondere bei feuchten Oberflächen.




Komfortabel
Hoher Tragekomfort und außergewöhnlich festes Material



200 Handschuhe pro Box
Schützt die Umwelt durch Reduktion von Verpackungsmaterial, Energie und Treibstoff für Transport. Spart Lagerplatz

StarGuard® TOUCH

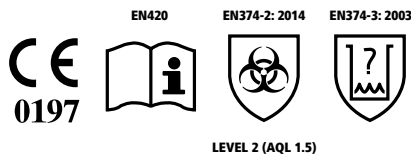

Ihre Wahl, wenn

- Sie auch bei längeren Tragezeiten nicht auf anhaltenden Komfort verzichten wollen
- Sie mit durch Blut übertragbaren Krankheitserregern arbeiten
- Sichere und zuverlässige Griffbarkeit bei der Arbeit mit kleinen Instrumenten nötig ist
- Ihre Fingerfertigkeit im Umgang mit einer Vielzahl von Werkzeugen nicht durch den Handschuh beeinträchtigt werden darf

Latex-Handschuhe besitzen nicht nur die beste Dehnbarkeit unter den Einmalhandschuhen, sondern auch exzellente Barriereeigenschaften gegen durch Blut übertragbare Krankheitserreger und andere Biogefährdungen, wasserlösliche Substanzen und schwache Säuren und Basen (pH- 4-10).

StarGuard® Touch			
Kat.-Nr.	Beschreibung	Größe	Packungsgröße
SG-T-XS	StarGuard® TOUCH	Extra klein	10 x 100
SG-T-S	StarGuard® TOUCH	Klein	10 x 100
SG-T-M	StarGuard® TOUCH	Mittel	10 x 100
SG-T-L	StarGuard® TOUCH	Groß	10 x 100
SG-T-XL	StarGuard® TOUCH	Extra groß	10 x 90

*90 Handschuhe pro XL Box.

Sicherer Griff und Tastgefühl

StarGuard® TOUCH ist ein komfortabler, vollständig texturierter Latex-Handschuh mit sicherer, zuverlässiger Griffbarkeit und exzellentem Tastgefühl.

- Exzellente Griffbarkeit unter feuchten und trockenen Umgebungsbedingungen
- Sehr gute Dehnbarkeit für außergewöhnlichen Komfort auch bei längerem Tragen
- Ideal für Arbeiten, die Fingerspitzengefühl voraussetzen



PSA Kat. III Komplexes Design. AQL 1,5. Naturfarbener Latex-Handschuh. Vollständig texturiert. Länge 245 mm. 100 Handschuhe/Box.*



Sichere Griffbarkeit von Latex

Latex-Handschuhe sind ideal für feine Arbeiten mit kleinen Werkzeugen. StarGuard® TOUCH sind vollständig texturiert für einen sicheren, verlässlichen Griff mit dem unvergleichlichen Tastgefühl eines Latex-Handschuhs.



Vollständig texturierte Oberfläche
für einen sicheren Griff



www.starlab.de

STARLAB GmbH

Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0
F: +49 (0)40 675 99 39 20

info@starlab.de
www.starlab.de

STARLAB International GmbH

Neuer Höltigbaum 38
22143 Hamburg
Germany

T: +49 (0)40 675 99 39 0
F: +49 (0)40 675 99 39 20

info@starlab.de
www.starlabgroup.com

STARLAB (UK), Ltd

5 Tanners Drive
Milton Keynes MK14 5BU
United Kingdom

T: +44 (0)1908 283800
F: +44 (0)1908 283802

infoline@starlab.co.uk
www.starlab.co.uk

STARLAB FRANCE SARL

30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
France

T: +33 (0)1 60 1371 70
F: +33 (0)1 69 4148 65

info@starlab-france.com
www.starlab-france.com

STARLAB S.r.l.

Via Pinturicchio 1
20133 Milano
Italy

T: +39 02 7020 1040
F: +39 02 7020 1033

info@starlabitalia.it
www.starlabitalia.it