

Secure Grip
and tactile sensitivity

StarGuard® Touch

In Compliance with:

Personal Protective Equipment EU Regulation 2016/425, PPE Cat. III, EN 21420:2020,
EN ISO 374-1:2016, EN 16523-1:2015, EN 374-2:2014 Level 2 (AQL 1.5), EN 374-4:2013,
EN ISO 374-5:2016, EN 455 parts 1, 2, 3 and 4, Regulation (EC) No. 1935/2004,
Protection against Bacteria and Fungi: PASS, Protection against Viruses: PASS

The following is a link to view the Declaration of Conformity:

<https://www.starlab.click/doc-starguard-touch>



EU Regulation
2016/425



KLMP



VIRUS

AQL
1.5



Available sizes:



100 per box




100 per box



MEDIUM
ART. NO.
SG-T-M

100 per box

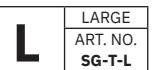

LARGE
ART. NO.
SG-T-L

100 per box



90 per box

WARNING:

EN 374-4:2013 Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals.

The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.

It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.

When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to the changes in the physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.

Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections.

The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the intended specimen.

Chemical

Performance Level

(EN ISO 374-1: 2016)

Degradation % change

(EN 374-4: 2013)

| | | |
|---------------------------|---|--------|
| (K) Sodium Hydroxide 40% | 4 | -94.2% |
| (M) Nitric Acid 65% | 2 | 83.8% |
| (P) Hydrogen Peroxide 30% | 4 | 13.8% |
| (L) Sulphuric Acid 96% | 1 | 78.0 % |

Performance Levels

Breakthrough Times (Minutes)

| | |
|---------|---------------|
| Level 1 | > 10 minutes |
| Level 2 | > 30 minutes |
| Level 3 | > 60 minutes |
| Level 4 | > 120 minutes |
| Level 5 | > 240 minutes |
| Level 6 | > 480 minutes |

| | | |
|-----------|---|--|
| BG | Латексови ръкавици без талк, двустранни, за единична употреба, нестерилни, 100 (XL 90) броя в опаковка по тегло | LT Lateksko prištinės be pudros, abiems rankom, vienkartinius naudojimo, nesterilius, 100 (XL 90) vienetų pagal svorį |
| CZ | Nepudrované, Nesterilní Rukavice Z Latexu, Balené Vážením Po 100 (XL 90) Kusů, Vhodné Stejně Na Obě Ruce | LV Lateksa ciimdi, bez pūdera, vienreizēji liešanai, nesterili, 100 (XL 90) gab. No svara |
| EE | Kasutamiseks mõeldud mittesteriilised puudrivabad nitriilist urumiskindad. Üks mudel – sobib nii paremase kui vasakus käte, 100 (XL 90) kinnast pakis, pakendatud kaalu järgi | MT Ingwanti latex bla trab ghall, "ambidextrous", Užu Uniku, Mhux sterili, 100 (XL 90) bičċiet bil-piz |
| GB | Powder-free Latex Gloves, Ambidextrous, Single Use, Non-sterile, 100 (XL 90) pieces by weight | NO Pudderfrie latex hanske, begge hender, engangs, ikke-sterile, 100 (XL 90) stykker etter vekt |
| GR | Γάντια λάτεξ χωρίς πούδρα, αμφιδέξια, μιας χρήσης, μη αποστειρωμένα, 100 (XL 90) τεμ κατά βάρος | PT Luvas de Látex, sem pó, ambidextras, uso único, não esterilis, 100 (XL 90) peças por peso |
| HR | Latex rukavice za jednokratnu upotrebu, bez pudera, nesterilne, pogodne za desnu i lejvu ruku, 100 (XL 90) kom u pakiranju | RO Manusi examinare din latex, nepudrate, ambidextre, de unica folosinta, nesterile, 100 (XL 90) buc/pac |
| HU | Hintópor mentes Latex kesztyük, kézkezes, egyszeri használatra, nem-steril, 100 (XL 90) darabos súly szerint | SI Rokavice iz lateksa, prožne, za enkratno uporabo, ne sterilne, 100 (XL 90) kosov po teži |
| IE | Lámhainni Laitease gan phúdar, comhdheasach, aonúsáide, neamhsteiriúil, 100 (XL 90) píosalai de réir meáchain | SK Nepúdrované, Nesterilné Rukavice Z Latexu, Balené Vážením Po 100 (XL 90) Kusov, Vhodné Rovnako Na Obě Ruky |

BG **Внимание:** Тези латексови ръкавици не са предназначени за предпазване от всички химикали и не са подходящи за работа с агресивни химически съединения, които изискват специална защита. Упоменатото време на издръжливост при работа с химикали се базира на лабораторни изпитания и може да се различава от реалното време в работата със поради влиянието на различни фактори като абразивност и топлинна деградация. Този продукт съдържа латекс от естествена гума, за който се знае, че предизвиква алергични реакции. Този продукт не е предназначен за ползване от или в близост до хора, които са алергични към латекс. Компонентите, които са използвани при производството на този продукт може да предизвикват алергични реакции при някои хора. В случаи, че се предизвика алергична реакция, не използвайте повече продукта и потърсете медицинска помощ. **Инструкции за употреба:** Само за еднократна и времева употреба. Не използвайте повторно. Не забравяйте изхвърляне на продукта, ако е уреден. Трябва да се изхвърли продукт като отпадък съобразно нормативната уредба във вашата страна. **Транспорт и съхранение:** Този продукт се съхранява в картонена опаковка по време на транспортиране. Съхранявайте продукта на хладно (<40°C), сухо и добре вентилирано място. Избъгайте пряко излагане на слънчева светлина, отбъчване с флуоресцентна светлина и рентгенови лъчи.

CZ **Upozornění:** Tyto latexové rukavice nejsou určeny k ochraně rukou před všemi chemikáliemi. Nejsou vhodné pro kontakt s agresivními chemikáliemi využívajícími si speciální („heavy-duty“) ochranné rukavice. Udáne časy průniku pro jednotlivé chemické látky zjistěny na základě laboratorních testů, se mohou lišit od reálných časů na pracovišti v důsledku takových faktorů, jako je odeře nebo teplotní degradace materiálu. Tento produkt obsahuje přírodní latex, o kterém je známo, že vyvolává latexové alergie. Složky použité pro jejich výrobu mohou vyvolávat i v některých uživatelů alergie k latexu. V takovém případě se nesmí tyto rukavice dalej používat a je treba pořádat se s lekařem. **Pokyny pro používání:** Používejte na jednorázovou a dočasnou účelu. Nepoužívejte opakovatelně. Pokud se rukavice poškodí, okamžitě sundujte z rukou. Do odpadu je dávajte podle místních předpisů pro nakládání s odpadem. **Transport a skladování:** Toto produkty musí být chráněny během transportu ochranným, kartonovým obalem. Skladujte je v chladné (menej než 40 °C), suché a dobré větrávací místo. Chraňte před přímym slunečním i fluorescenčním světlem a RTG zářením.

EE **Hoitatus:** need lateksit kindad ei ole mõeldud kaitseks kõlkide kemikaalide eest. Nad ei kaitse otseks kokkuuputava korral agressiivsete ainetega. Sel puhul tuleks kasutada spetsiaalseid, keemiliselt väga vastupidavaid kaitsekindaid. Tulenevalt abasisioonist, termilisest degradatsioonist või teistest sarnastest teguritest, võib laboratestides välja töödud aeg, mille joosk sul kemikaalid kindast läbi läbel, erinevates olukordades muutuda. Toode sisaldaat naturaalseid lateksi, mis teadaolevalt võib põhjustada lateksiallergiat. Seeotteks ei tohiks lateksiallergiaga inimesed ega teised töötajad nende lahedesuseid latekskindad kasutada. Toote koostisosad võivad monedel kasutajatel põhjustada allergilist reaktsiooni. Allergilise reaktsiooni korral tuleks kinnaste kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga. **Kasutusjäuhend:** kindad on mõeldud lühiajaliseks kasutamiseks, peale esmakasutust ei tohiks neljat kuni ühest parna. Kindad on kalustatud, tuleks nende kasutamiseni kohalelikult kontrollida ja kasutada. Kasutatud kindad tuleks utiliseerida vastavalt kohalikele kehtivatele jäätmekaitstushõuetule. **Transport ja säilitamine:** toode tuleks transportida kastis ning säilitada jäedades (<40°C), kuivana ja hindast ventileeritud kohas. Kasuta otseks pääkevalguse, fluoresceeriva valguse ning röntgenkiingu eest.

GB **Caution:** These latex gloves are not intended to provide a barrier against all chemicals and are not suitable for contact with aggressive chemicals requiring a specialised heavy-duty protection glove. Quoted breakthrough times for chemicals based on laboratory tests may differ from actual times at the workplace due to factors such as abrasion and temperature degradation. This product contains natural rubber latex which is known to cause latex-induced allergies. This product is not intended for use by or near people with a latex allergy. Compounds used in the manufacture of this product may cause allergic reactions in some users. In case of an allergic reaction, discontinue use and seek medical advice. **Instructions for use:** For single and transient use only. Do not reuse. Immediately discontinued use and disposed according to local regulations. **Transport and storage:** This product to be stored in carton during transportation. Store product in a cool (<40°C), dry and well-ventilated location. Avoid exposure to sunlight, fluorescent lighting and X-rays.

GR **Προσοχή:** Τα γάντια τιτυριδού δεν προορίζονται να παρέχουν ένα φράγμα εναέριτων ώλων των χημικών και δεν είναι κατάλληλα για επαγκρή χημικά που απαιτούνται ένα ειδικευμένο φράγμα τύπου γάντιαν προστασίας. Οι επισήμων χρόνιοι αντογγός βασίζονται στην εργασταριακές δοκιμές και μπορεί να διαφέρουν από τους προγραμματικούς χρόνους στο χώρο εργασίας εξαιτίας παραγόντων όπως τριβή και υποβάθμια σημαίνουν την θέματρασας. Οι ενδείξεις ποικιλομορφώνται στην κατασκευή του προϊόντος αυτού μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιτροπές σε ορισμένους χρήστες. Σε περίπτωση αλλεργικής αντιτροπής, διακοπέται τη χρήση και ζητείται ιατρική συμβούλου. **Οδηγίες για τη χρήση:** Για μία και μόνο προώρινη χρήση. Μην χρησιμοποιηθεί πάλι. Εάν οι διακοπές γίνονται μετα έπειτα από βλάβη. Απορρίψτε το βάσον των τοπικών κανονισμών. **Μεταφορά και αποθήκευση:** Αυτό το πρόϊόν πρέπει να ρυθμίστε σε κιβώτιο κατά τη μεταφορά. Αποθήκευτε το πρόϊόν σε δροσόρο (40°C), σухο και καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε την έκθεση σε ηλιακό φως, λαμπτήρες φωτισμού και ακτινογραφίες.

HR **Oprez:** Latex Rukavice nisu otporne na sve kemikalije, te nisu prikladne za kontakt s agresivnim kemikalijama koje zahtijevaju pojedinu zaštitu u posebnim uvjetima. Navedena vremena prodora za pojedine kemikalije dobivena u laboratorijskim testovima premećanje mogu se razlikovati od vremena prodora u radnom uvjetima i to iz zbog raznih čimbenika poput abrazije i temperaturne degradacije. Ovaj proizvod sadrži prirodni latex gume koja može izazvati alergijske reakcije, te kao takav nije namijenjen upotrebi osobama alergičnim na latex. Spojivi koji se koriste u proizvodnji spomenutog proizvoda mogu kod nekih ljudi uzrokovati alergijske reakcije. U slučaju alergijske reakcije, prekinuti upotrebu i zaštražiti lječnički savjet. **Upute za uporabu:** Za jednokratnu i kratkotrajnu upotrebu. U slučaju oštećenja rukavice prekinuti s uporabom. Nakon korištenja odložiti u skladu s lokalnim propisima. **Transport i skladističenje:** Za vrijeme transporta proizvod je pakiran u kutijama. Skladištiti proizvod na hladnom (<40 °C), suhom i dobro prozračenom mjestu. Izbjegavati izlaganje suncu, fluorescenčnoj rasveti i x-zrakama.

HU **Figyelem:** ezek a latex kesztyök nem nyújtanak védelmet minden vegyész által hatolásá ellen és nem alkalmaskak olyan agresszív vegyszerekkel való érintkezésre, melyek speciális nagy védelmet nyújtó védelmes kesztyűt igényelnek. A vegyszerek hivatkozzák általában a leghosszabb hőmérsékletű laboratóriumokban vizsgálatokon alapul és eltérhet a munkahelyeken történő használattól. Ez a termék természetesen kaukus latextet tartalmaz, amelyről ismert, hogy latex indált allergiát okoz. Ez a termék latex allergiás emberek számára vagy közeliébukkan való használata nem ajánlott. A gyártásnak használt összetevők egyes használóknak okozhatnak allergiás reakciókat. Ebben az esetben a terméköt további használata ismeretlenen kérjen orvosai javaslatot. **Használati utasítás:** kizárási vagy egyszeri és általában használata tilos. Használat nélkül a helyi rendelkezések szerint helyezze el. **Szállítás és tárolás:** Szállítás kartonban. Tárolás hűvös (<40 °C), száraz és óriás sűrűszellőben. Nem szabad kitemni hapsugárzásnak, fluoreszens fények né vagy röntgen sugárzásnak.

IE **Rabhadh:** Níl sé i gceist go mbeadh bacainn ann i gcoinne gach ceimiceáin leis na lámhainn láiteéise seo agus níl siad oiriúnach do theagmháil le ceimiceáin ionsaitheach a céiliún lámhainn cosaonta tromsháothair speisialta. D'hfeadhach difrifocht a bheith ann idir amantail luaithe o'thaobh 'bridgehead trid' ceimiceáin atá bunaithe ar thriailacha saotharlainne agus amantail iarbhir san ionad oibre de bharr fachtóiri ar níos scriobadh agus dighráid teoatha. Tá láitéis rubar aiceanta sa tháirge seo agus d'hfeadh sé a bheith in chuis aillteangeacha láitéis. Níl sé i gceist go n-úsáidtear dhaoine le (nó gar do dhaione) aillteangeacha láitéis. D'hfeadhán la hábhair a n-úsáidtear i dtontúl na páirthe seo a bheith in chuis frithghiomhoniúla aillteangeacha do roinnt úsáideoir. I gcás frithghiomhoniúla aillteangeach, scór úsáid aonartháin. Ná ath-úsaíd. Scór úsáid laithreach i gcas domáiste. Cuir de láimh de réir dō rialachán atílú. **Iompár agus stórlá:** Caithfidh an táirge seo a bheith faoi stórlá i gcartán le línn impair. Den stórlá don táirge in áit fionnúar (<40 °C) tírrim agus dea - aeráilte. Seacháin ó nocthadh do sholas na gréine, soilse fluaraiseachá agus x - ghatann.